

1) DESCRIPCIÓN / USOS

El KIT DE BIPEDESTACIÓN STANTI es un accesorio que facilita la bipedestación de personas con parálisis en las piernas o parálisis total, logrando modificar la postura y cargar el peso del cuerpo sobre las piernas. Está diseñado para ser usado sobre un elevador LUCE. Su funcionamiento es muy simple, y rápido de colocar. Es ideal para uso en domicilios teniendo amplia variedad de opciones de movilización con un mínimo de implementos. También es de suma utilidad en gimnasios de rehabilitación logrando gracias a la polifuncionalidad, el mejor aprovechamiento de los espacios y el equipamiento

2) DESCRIPCIÓN DEL KIT:

a) Nombre de las piezas

i) Arnés:

- (1) Faja superior, con presillas regulables
- (2) Faja inferior con tensores y presillas regulables.
- (3) Musleras

ii) Traba rodillas:




- (1) Tabla con almohadilla.
- (2) Soportes, con ajustes rápidos, para regular altura. Los soportes tienen agujeros y trabas para regulación.
- (3) Espigas bridadas de fijación.
- (4) Tornillos.

iii) Apoya pies:

- (1) Tabla con soprtres.
- (2) Tirador para fijación al equipo.

b) Instalación:

- i) Colocar con los tornillos las espigas bridadas en el anclaje según la figura. Estas quedarán puestas en el equipo no siendo necesario removerlas cuando no se usa el kit.
- ii) Colocar los soportes en las espigas y fijar la altura ajustando el cierre rápido.
- iii) Colocar el traba rodillas en el soporte apoyándolo sobre la traba
- iv) Abrir las patas al máximo y colocar la tabla apoya pies encastrando los anclajes en las patas. Enhebrar el tirador por el agujero que tiene el elevador encastrar la hebilla y ajustar para que no se salga.
- v) Quitar el que une el extremo del brazo, y retirar la punta del mismo.
- vi) Colocar el tirador con la traba hacia abajo y colocar nuevamente el perno y el seguro.

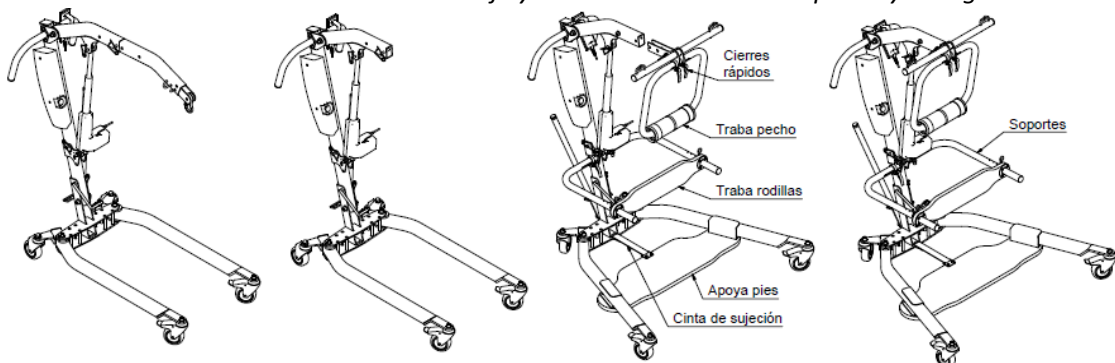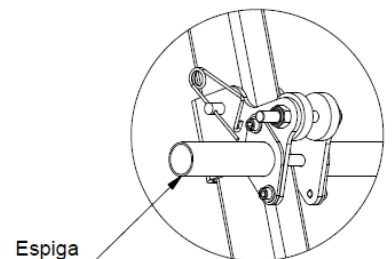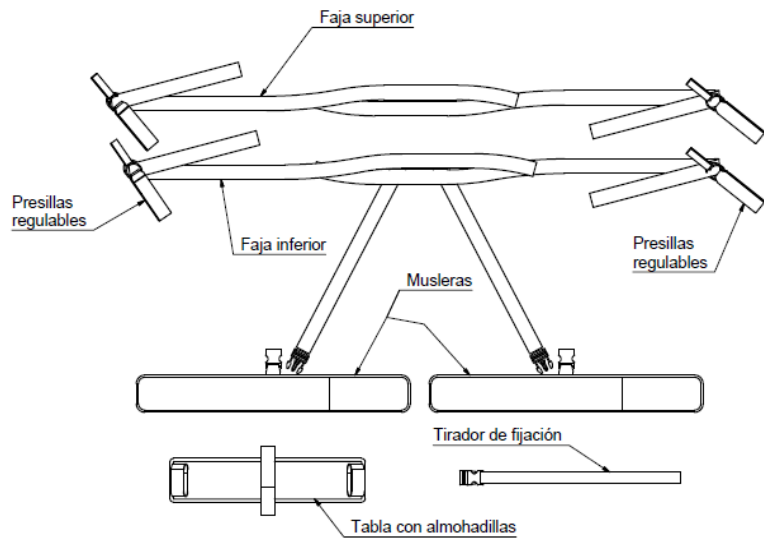

3) PRECAUCIONES O CONTROLES ANTES DE USAR:

- a) Verificar el correcto armado y ajuste de las piezas.
- b) Verificar el correcto estado de los arneses. Si se detectan desgastes, comprar el repuesto.

4) INSTRUCCIONES DE USO

a) Colocación:

- i) Armar las piezas según las instrucciones de instalación.
- ii) Verificar que el actuador esté en su posición cerrada.
- iii) Enfrentar el elevador al paciente.
- iv) Pasar la faja inferior con tensores por debajo de las piernas hasta llegar a la mitad de los glúteos, dejando los tensores hacia el lado de las rodillas. Las presillas regulables se deben enganchar al tirador y tensar.
- v) Pasar las musleras y ajustarlas cerca de las rodillas.
- vi) Insertar las hebillas macho de los tensores en el broche hembra de las musleras y tensar.
- vii) Pasar la faja superior con presillas regulables por detrás de la espalda y debajo de las axilas y enganchar en el tirador. Tensar.
- viii) Accionar el actuador hasta que la persona quede en forma vertical. Si no queda ajustar las cintas hasta que quede. En esa posición se puede sentar y bipedestar al paciente repetidas veces.

5) GARANTÍA:

El período de garantía es por un año, que no incluye los arneses. Estos están cubiertos por defectos de fabricación que deberán informarse antes del primer mes de recibido el equipo. Para el reconocimiento de la garantía es preciso que la etiqueta con el número de serie se encuentre sana y legible, y que se conserve el comprobante de compra.

6) TABLA DE COMPATIBILIDADES

MODELO	KIT DE BIPEDESTACIÓN STANTI	COMENTARIOS
NATIVUS 150	NO	
LUCE 150	SI	
FORTE 210	NO	
FORTE PLUS 310	NO	